


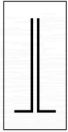


**AJLA MEDICAL**  
GROUP

 **BODY HEALTH**  
Chile

**Crystal 3D<sup>FULL</sup>**





**AJLA MEDICAL  
GROUP**



LASER CRYSTAL 3D FULL es la alternativa más eficaz en depilación láser para clínicas de vanguardia. Mezcla los beneficios de las 3 longitudes de onda mundialmente conocidas en estética, logrando resultados antes impensables. LASER CRYSTAL 3D FULL ofrece tratamientos de alta gama con resultados en cualquiera de las longitudes de onda. Seguro, Eficaz y Placentero.



**40Millones** de disparos garantizados\*

Incluye dos manípulos, uno exclusivo para zonas íntimas, asegurando una mayor bioseguridad.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO:


CRYSTAL MOTION

SISTEMA CRYSTAL POINT

SISTEMA PROFESSIONAL MODE

SSR MODE (SUPER SKIN REJUVENATION)



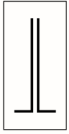

**AJLA MEDICAL**  
GROUP

Crystal3D<sup>FULL</sup>




Tus tratamientos  
mucho mas rápidos  
**con Crystal Motion**

**Con Professional mode**  
edita tus tratamientos  
con la mayor eficacia,  
realizado para expertos en depilación

**Crystal Point**  
para zonas  
pequeñas y localizadas

Innova con su  
**sistema SSR**  
para rejuvenecimiento  
de piel facial y corporal



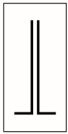

**AJLA MEDICAL**  
GROUP

Crystal3D<sup>FULL</sup>



**CryoCooling**

El LASER CRYSTAL 3D FULL es desarrollado por Body Health, cuenta con CryoCooling, el sistema de refrigeración sinérgico, a base de agua, que genera un efecto anestésico y protector en la piel.



Eficacia clínicamente comprobada.



Espectro extra de emisión para depilación láser.



Procedimientos más rápidos, seguros y placenteros.



Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas.



Perfecto para cualquier área del cuerpo.




Tecnología con los mejores resultados del mercado.



Sistema de refrigeración CryoCooling.



El primer y único  
**láser de depilación**  
certificado y patentado en Chile

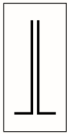



# Evolución en 3 dimensiones

- CRYSTAL • Ofrece la mejor absorción de energía por el cromóforo melanina.
- ALEXANDRITA • Brinda excelentes resultados en pelo fino y de color claro.
- 755nm • Especialmente eficaz para vellos superficiales (cejas o el labio superior).

- CRYSTAL • Potencia media-alta para realizar tratamientos de forma rápida.
- DIODO • Su profunda capacidad de penetración lo posiciona en el tratamiento ideal para las áreas de los brazos, piernas, mejillas y la barba.
- 810nm • Muy efectivo y seguro para el tratamiento de pieles oscuras

- CRYSTAL • Enfocado en tratar las pieles más oscuras y bronceadas.
- Nd Yag • Ofrece la penetración más profunda del haz de luz, permitiendo tratar el vello incrustado en cuero cabelludo, brazos y áreas púbicas.
- 1064nm • Su mejor absorción por el cromóforo acuoso genera una temperatura más alta, aumentando su potencia.

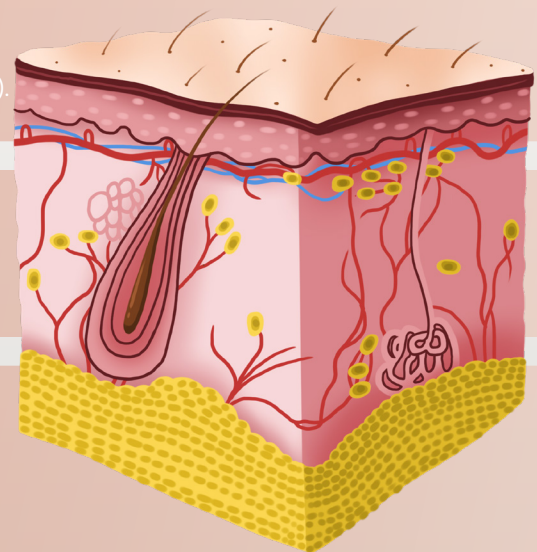

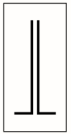


**AJLA MEDICAL**  
GROUP

Crystal3D<sup>FULL</sup>



diseño  
rápido  
e intuitivo

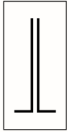

**AJLA MEDICAL**  
GROUP

#### FABRICANTE BODY HEALTH GROUP

NOMBRE DEL PRODUCTO BHS 501 CRYSTAL 3D

#### Datos de alimentación eléctrica nominal

Tensión: 120 - 240 V~

Frecuencia: 50 / 60Hz

Consumo: 1700 VA

#### CONDICIONES AMBIENTALES (DURANTE LA OPERACIÓN)

Temperatura ambiente: +15° C a +25° C

Humedad relativa: 30% a 60%

Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa

#### CONDICIONES AMBIENTALES (DURANTE EL TRANSPORTE Y / O ALMACENAMIENTO)

Temperatura ambiente: +10° C a +25° C

Humedad relativa: 30% a 60%

Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa

Dimensiones y pesos

Altura: 1100mm

Anchura: 380mm

Profundidad: 430mm

#### TERAPIA

Tipo de láser: CW, Matriz de láser de diodo GAAIAS

Longitud de onda: 755+810+1064NM±5NM

Densidad de energía: 1- 62 J/Cm<sup>2</sup>

Tasa de repetición de pulso: 1 - 10 Hz

Ancho de pulso: 10-300 ms

Potencia de salida láser: 800 W

#### INTERFAZ DE OPERACIÓN

9,7" TOUCH TRUE COLOR LCD Pantalla táctil

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Sistema de refrigeración: Refrigeración por agua, refrigeración por aire forzado, radiador de cobre y sistema de refrigeración TEC

Temperatura de enfriamiento para punta de zafiro: 0-5° C

# Crystal3D<sup>FULL</sup>

#### TOMA DE SERVICIO

Conector USB: Para software de sistema actualizable

Software diseñado por equipo médico y de ingenieros expertos en aparatología médico-estética, testeado en clínica por más de 2 años, sometido a exhaustivas pruebas de calidad y bioseguridad.



[www.alla-medical.cl](http://www.alla-medical.cl)

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

\*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso