



**AJLA MEDICAL
GROUP**



IBRAMED

CHILE

POLARYS





exclusiva tecnología en criolipólisis de contraste la temperatura en justa medida

Polarys es una tecnología doblemente eficiente y efectiva en la reducción de grasa localizada y el modelado del contorno corporal no invasivo a través del sistema criolipólisis innovadora. El equipo incluye 4 modalidades de tratamiento: criolipólisis convencional, de contraste, de reperfusión y de preparo. Polarys entrega un tratamiento seguro que introduce un sistema de enfriamiento eficaz, garantizando la estabilidad de la temperatura seleccionada durante el uso simultáneo de ambos aplicadores, todo el tiempo de tratamiento. Permite el ajuste de temperatura en la pantalla (variable -11°C y $+42^{\circ}\text{C}$), con la temperatura real y la visualización de aplicación inmediata, evitando los efectos adversos, como la temida quemadura.


reducción de un
**42% de la
capa adiposa.**

INDICACIONES

Tratamiento de adiposidad localizada.

Modelado no invasivo del contorno corporal.

Pre operatorio de liposucción.

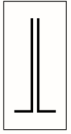

¿Qué hace único a Polarys?



4 métodos de reducción de adiposidad en un sólo equipo

CRIOLIPÓLISIS CONVENCIONAL

Técnica de enfriamiento en conjunto al sistema de succión al vacío, generando cristalización y subsiguiente apoptosis de las células del tejido adiposo.

CRIOLIPÓLISIS DE CONTRASTE

Técnica basada en el uso de calor al principio y al final del procedimiento, favorece la mayor cristalización de adipocitos y una mejor destrucción de los mismos.

CRIOLIPÓLISIS DE REPERFUSIÓN

Técnica de calentamiento al final procedimiento. Su utilización mejora reperusión / recuperación tisular.

CRIOLIPÓLISIS DE PREPARACIÓN

Técnica de calentamiento al inicio del procedimiento, con el objetivo de aumentar la maneabilidad de los tejidos.




TRATAMIENTO
REGIÓN AXILAR
INTERIOR



TRATAMIENTO
INFRAUMBILICAL




TRATAMIENTO
REGIÓN LATERAL

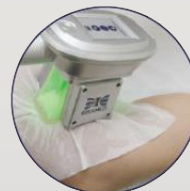

TRATAMIENTO
REGIÓN INTERNA
DE RODILLA



TRATAMIENTO
SUBMENTÓN

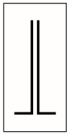

AJLA MEDICAL
GROUP

POLARYS

sólo lo descubres
con
Polarys



Uso simultáneo de 2 aplicadores con controles independientes, lo que posibilita el tratamiento de áreas diferentes, así como fomenta la aplicación en pacientes distintos al mismo tiempo.

Diseño moderno y fácil desplazamiento.

4 tamaños de aplicadores, lo que permite el tratamiento de diferentes áreas y biotipos (exclusivo papada, pequeño, mediano, grande).

4 modos de vacum: continuo y pulsado 1, 2 y 3. Los modos pulsados permiten el tratamiento de áreas más compactas y adheridas con mayor confort y menor riesgo de hematomas.

Pantalla táctil con Menú interactivo de informaciones.


Accesorios personalizados y funcionales: cojines y fajas elásticas para soporte del aplicador, reglas para demarcar el área a ser tratada, plicómetro.

Indicador luminoso de calor y frío en el aplicador.

Botón Pause: interrumpe la terapia sin perder datos programados.


Contraseña para desbloqueo: acceso permitido solamente para personas autorizadas.

exclusivo manípulo para papada.

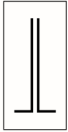

AJLA MEDICAL
GROUP

POLARYS

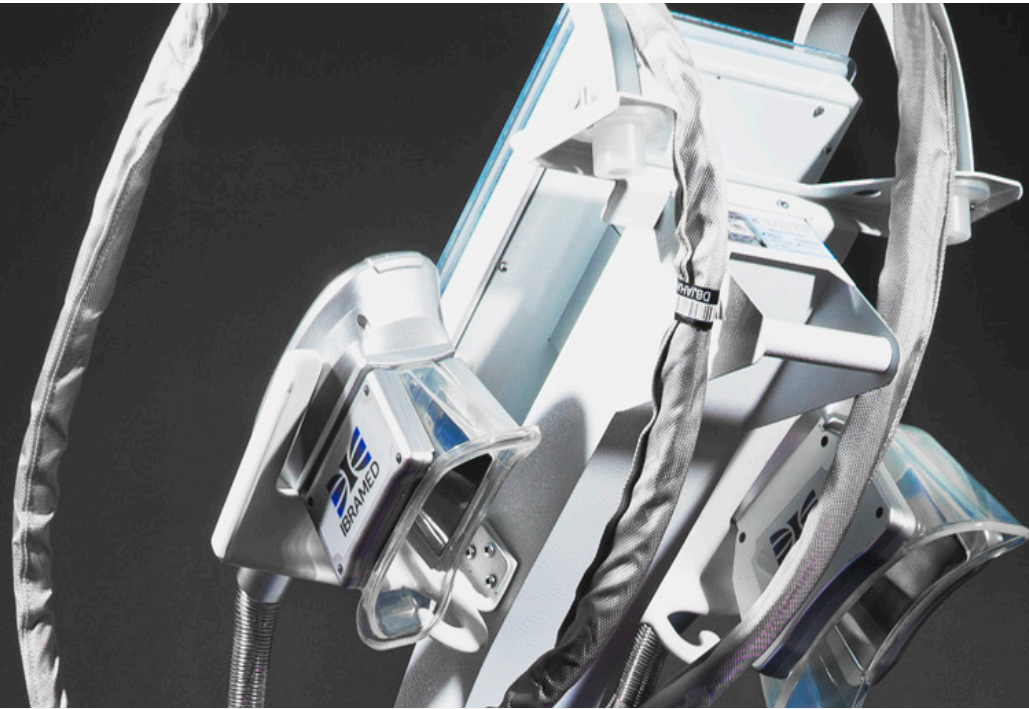

Bio segu ridad

ante todo

Sistema de enfriamiento eficaz que garantiza la estabilidad de la temperatura durante el uso simultáneo de ambos aplicadores en todo el tiempo de tratamiento con su doble sensor de temperatura (en equipo y manipulador).

Clean Mode: Sistema de autolimpieza de los aplicadores y de los mangos, lo que garantiza a higienización efectiva, funcionamiento correcto, practicidad y mayor durabilidad del equipo.

Control del modo de intensidad del vacum, modo start/stop puede ser modificado desde el propio aplicador.





AJLA MEDICAL
GROUP

POLARYS




Nuevo Aplicador de placas

POLARYS incluye la nueva opción de Criolipólisis plana con aplicadores de placa. Ideal para zonas que no poseen pliegue o de difícil succión, como brazos, cara interna de los muslos, etc.

Para garantizar un perfecto acoplamiento, el aplicador de placas tiene unas dimensiones de 10x15cm, una ligera curvatura y bandas de fijación, siendo totalmente cómodo y eficaz.



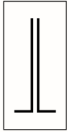

AJLA MEDICAL
GROUP

POLARYS

FABRICANTE: IBRAMED

NOMBRE DEL PRODUCTO: POLARYS

BIOVOLTIOS: 127 - 240 VOLTS - 50/60 HZ.

TEMPERATURA ENFRIAMIENTO: Hasta -11°C

TEMPERATURA CALENTAMIENTO: Fija en 40°C

INTENSIDAD DE SUCCIÓN: De 0 hasta 550 mmHg

MODOS DE TEMPERATURA:

Calentamiento inicial + enfriamiento

Enfriamiento + Calentamiento final

Calentamiento inicial + Enfriamiento + Calentamiento final

DIMENSIONES:

ANCHO: 39,8CM (15,67IN);

PROFUNDIDAD: 42CM (16,54IN);

ALTURA: 17,8CM (7,01IN);

PESO BRUTO (CON TRANSDUCTOR, ACCESORIOS Y MUEBLE): 36KG.



POLARYS





www.alla-medical.cl

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso